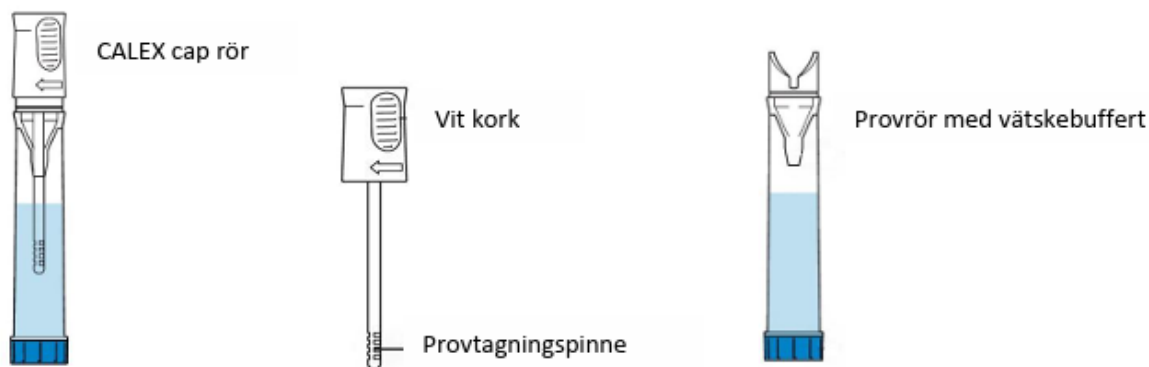



VÄNLIGEN LÄS NOGA HELA PROVTAGNINGSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR**1 Förberedelse**

- CALEX Cap-rör kan förvaras i rumstemperatur eller kyl (2-28 °C) innan användning. Om CALEX Cap-röret förvarats kallt ska det rumstempereras innan användning.
- Den blå korken i underdelen av röret skall **ALDRIG** öppnas.
- Den vita korken är gjord för att förslutas för alltid och kan alltså inte öppnas igen när den väl klämts på plats.
- Det är rekommenderat att avföring från dagens första tarmtömning används.
- Använd ett rent kärl (ex papperstallrik eller toalettpapper) för uppsamlande av avföring.
- Om du spiller ut vätskebufferten, be om ett nytt CALEX Cap-rör.
- Se till att provet är märkt med ditt personnummer, skriv även datum för provtagning för hand på etiketten.
- Lämna provet på din vårdcentral eller på lab. så snart som möjligt (inom 24h).


2 Gör så här

1. Håll röret enligt bilden med den vita korken upp  ta av korken genom att vrida denna medsols samtidigt dra uppåt.

SKRUVA ALDRIG AV DEN BLÅ UNDERDELEN 

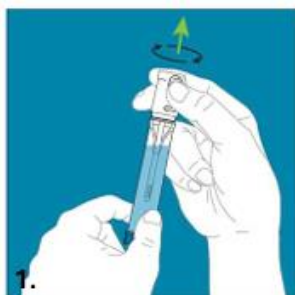

2. Doppa provtagningspinnen i avföringen och vrid, upprepa tre till fem gånger tills skårorna är helt fyllda.

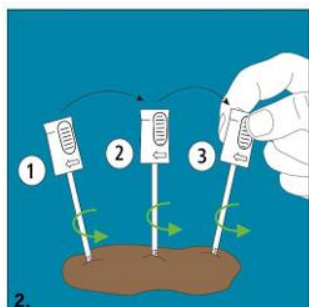

3. Sätt tillbaka pinnen i CALEX Cap- röret med vätska, tryck ihop röret tills du känner två klick.



Förvara provet i kyl 2-8 °C tills du lämnar det på din vårdcentral eller på lab.

DOKUMENTHISTORIK

Förändring i aktuell utgåva

Sida	Förändring
	Nyutgåva p g a 2-årsregeln, inga ändringar

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.