


VÄNLIGEN LÄS NOGA HELA PROVTAGNINGSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR

1 Förberedelse

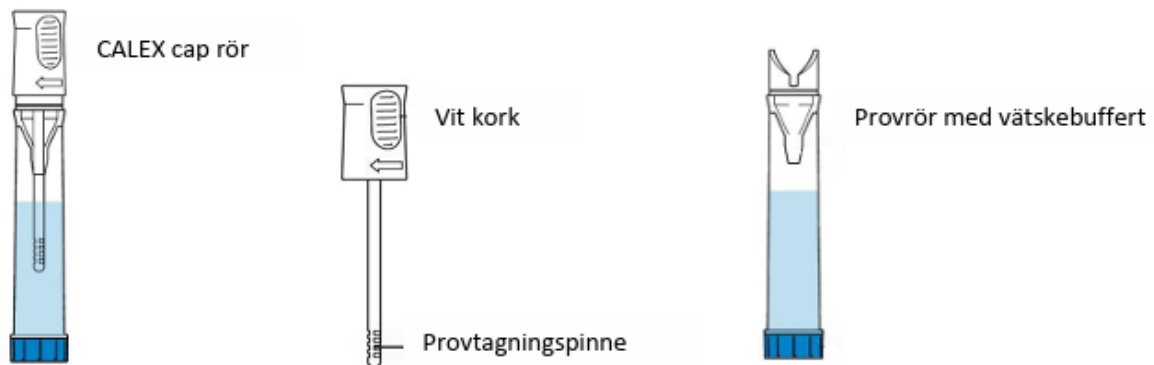


- CALEX Cap-rör kan förvaras i rumstemperatur eller kyl (2-28 °C) innan användning. Om CALEX Cap-röret förvarats kallt ska det rumstempereras innan användning.
- Den blå korken i underdelen av röret skall ALDRIG öppnas.
- Den vita korken är gjord för att förslutas för alltid och kan alltså inte öppnas igen när den väl klämts på plats.
- Det är rekommenderat att avföring från dagens första tarmtömning används.
- Använd ett rent kärl (ex papperstallrik eller toalettpapper) för uppsamlande av avföring.
- Om du spiller ut vätskebufferten, be om ett nytt CALEX Cap-rör.
- Se till att provet är märkt med ditt personnummer, skriv även datum för provtagning för hand på etiketten.
- Lämna provet på din vårdcentral eller på lab. så snart som möjligt (inom 24h).


2 Gör så här

1. Håll röret enligt bilden med den vita korken upp **V** ta av korken genom att vrida denna medsols samtidigt dra uppåt.

SKRUVA ALDRIG AV DEN BLÅ UNDERDELEN **X**

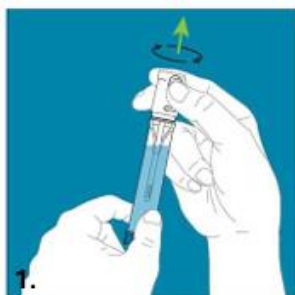

2. Doppa provtagningspinnen i avföringen och vrid, upprepa tre till fem gånger tills skårorna är helt fyllda.

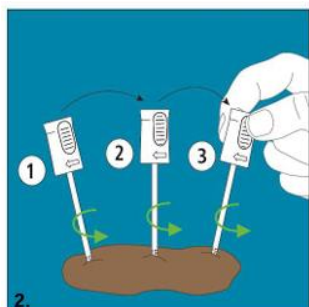

3. Sätt tillbaka pinnen i CALEX Cap- röret med vätska, tryck ihop röret tills du känner två klick.



Förvara provet i kyl 2-8 °C tills du lämnar det på din vårdcentral eller på lab.

DOKUMENTHISTORIK

Förändring i aktuell utgåva

Sida	Förändring
	Instruktionen är nu dokumentstyrd.

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.