


# Trakealvård

byte av kanyl

Ett gemensamt utbildnings material  
framtaget i samverkan med  
Trakealvårdsgrupp på Falu lasarett och Kompetenscentrum



# Byte av trakealkanyl

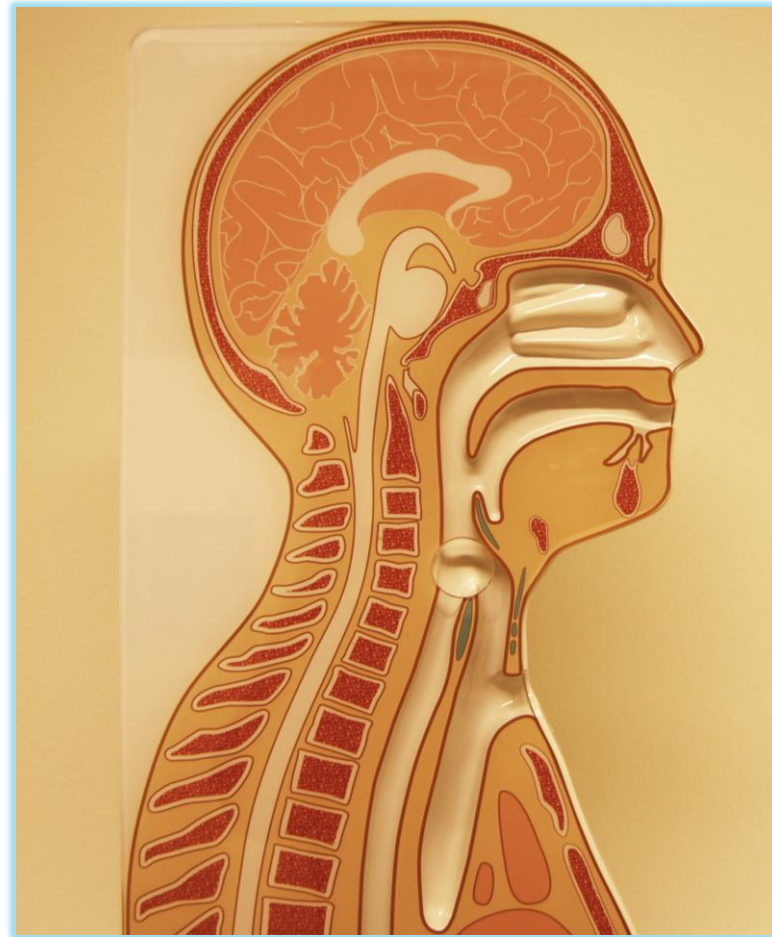


# Förberedelser

- Informera brukaren/patienten
- Ta fram det material du behöver
- Tillämpa basala hygienrutiner
- Kontrollera att kuffen på den nya kanylen håller tätt
- Se medföljande bruksanvisning



# Byte av trakealkanyl

- Avlägsna banden som håller kanylen på plats
- Ta bort trakeallapp och fukt/värmeväxlare eller ventilatorslang

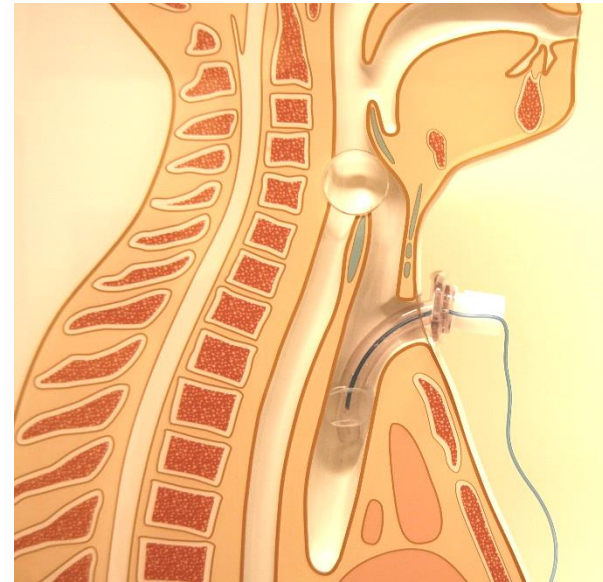

# Byte av trakealkanyl

Töm kuffen





Sug rent när du tömt kuffen



# Byte av trakealkanyl



- Byte av kanyl kan göras med eller utan ledare
- Vid byte med ledare kan en avklippt sugkateter användas
- För ner ledaren

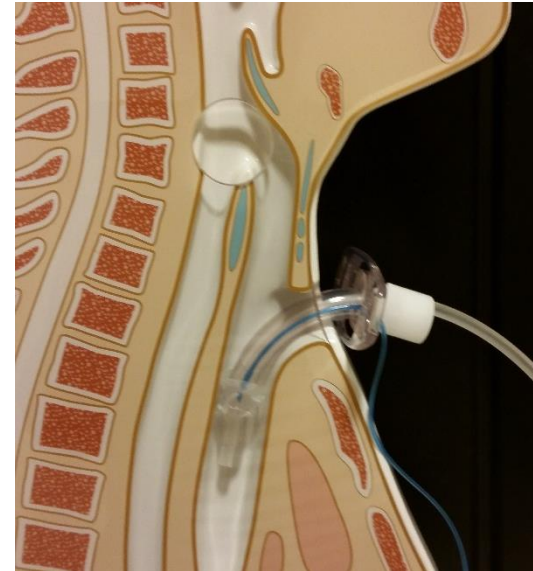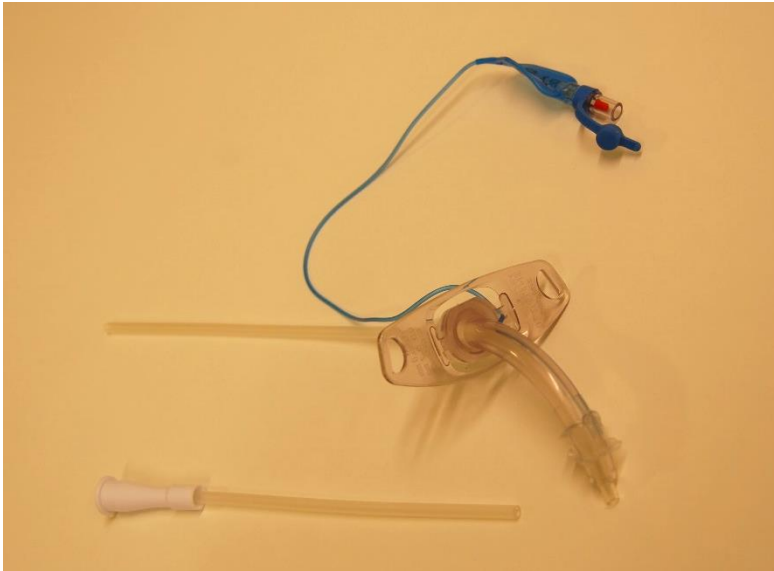




# Byte av trakealkanyl

- För ut kanylen
- Håll kvar ledaren hela tiden

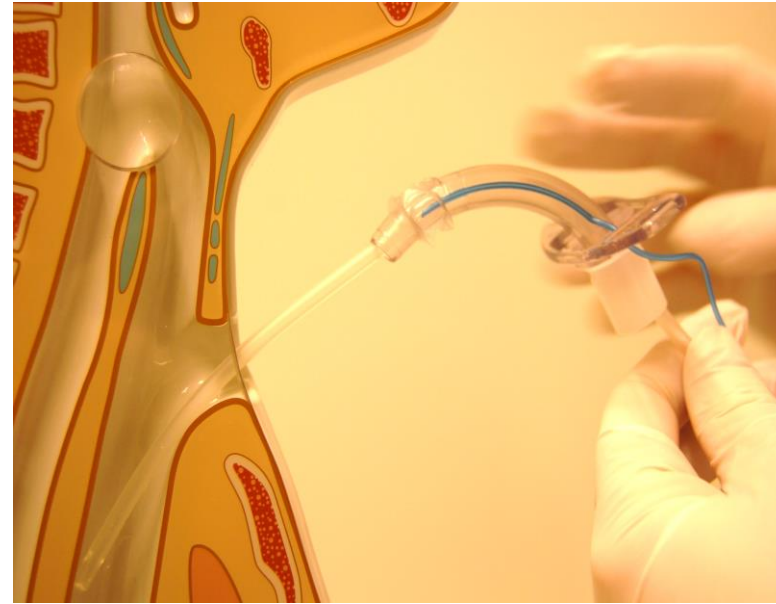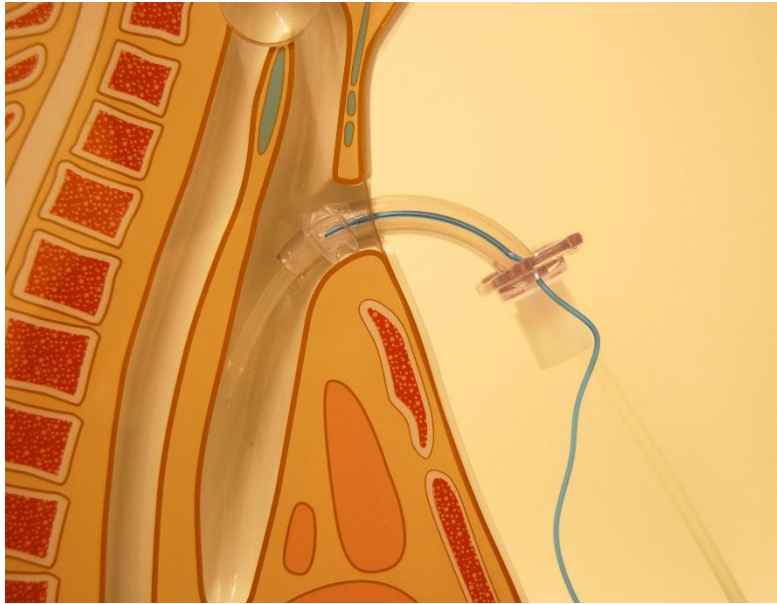

# Byte av trakealkanyl



- Ta bort kanylen
- Håll kvar ledaren

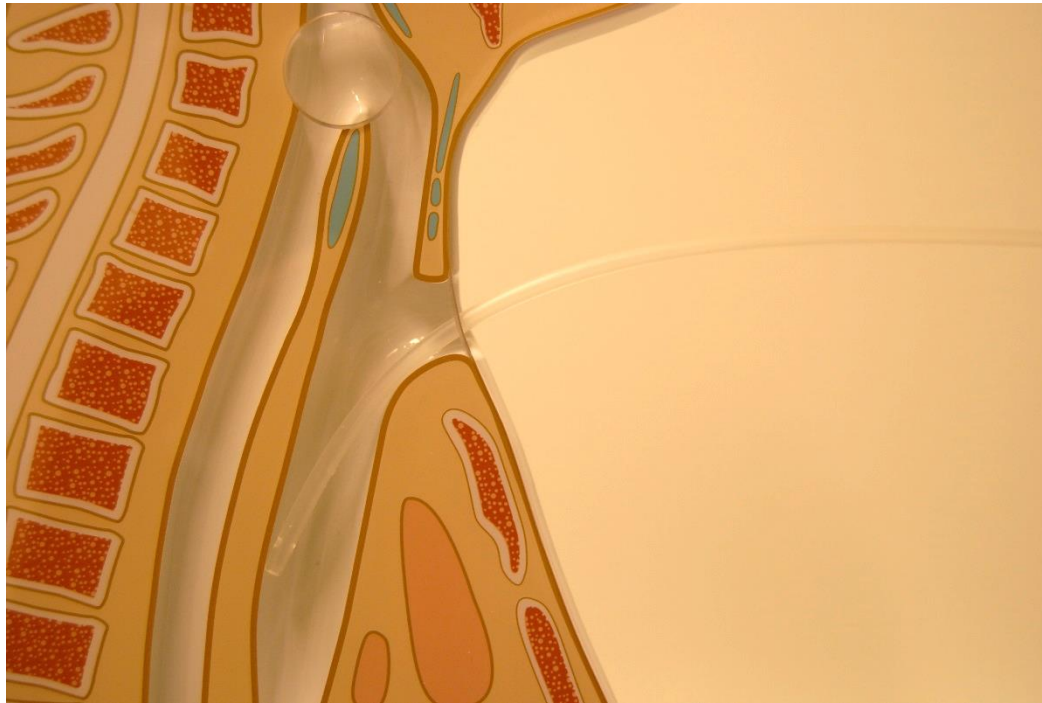



# Byte av trakealkanyl

- För ner den nya kanylen över ledaren
- Kuffa upp och fixera kanylen med trakealbandet
- Sätt på en ny trakeallapp och fukt/värmeväxlare eller ventilatorslang

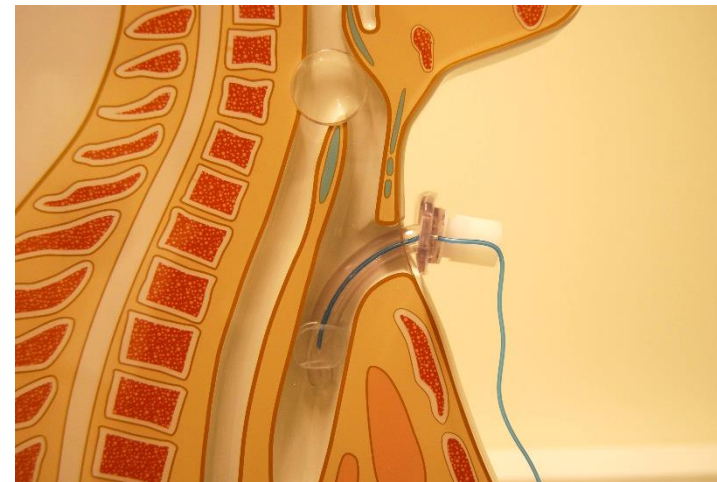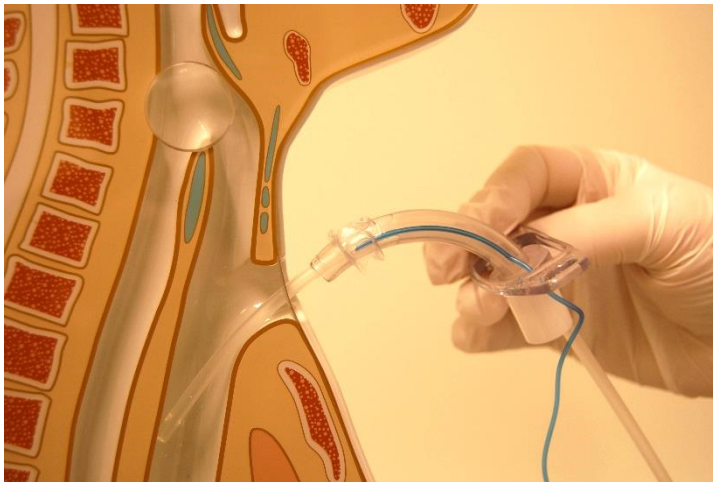

# Dokumentera

- Datum
- Vilken typ av trakealkanyl och storlek
- Kufftryck
- Stomats utseende och eventuella förändringar
- Registrera tidpunkt för nästa planerade byte

